

# TESTEOL-HIV 1 & 2 - MODE D'EMPLOI

## Constituant du kit d'essai

Chaque kit contient:

Une pochette stérile contenant une pipette et une plaquette d'essai.

Une lancette automatique (autopiqueur) pour prélever la goutte de sang (+ une de rechange).

Un flacon compte-gouttes contenant le liquide révélateur.

## Stockage et stabilité

Le kit doit être stocké à une température comprise entre 4 et 30 °C.

Référez-vous à la date de péremption inscrite sur l'emballage pour la stabilité du produit.

## Présentation de la plaquette de test.



La plaquette à une dimension de 85 x 19 mm et comporte 3 zones :

A – zone pour poser l'échantillon de sang.


B – zone pour poser le liquide révélateur.

C & T – zones de contrôle et d'affichage du résultat.


## Procédure

Se laver les mains et la zone de prélèvement de l'échantillon sanguin, désinfectez la zone de prélèvement ;

Porter les composants du test à la température ambiante avant de les utiliser.

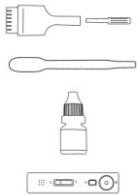


1) – Ouvrez la boîte et ouvrir le sachet contenant la plaquette de test et la pipette. Préparer la lancette automatique (autopiqueur). Serrez le bouchon du flacon contenant le liquide révélateur dans le sens des aiguilles d'une montre afin de percer le bec du flacon compte-gouttes. Une fois ouverts, les dispositifs doivent être utilisés immédiatement.

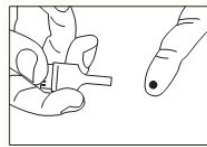

5) - Après piqure, effectuez une pression intermittente près de l'endroit piqué pour augmenter et obtenir un volume de sang suffisant (une grosse goutte).




2) - Dévissez le capuchon (faire pivoter 1 x) de l'autopiqueur (lancette automatique).

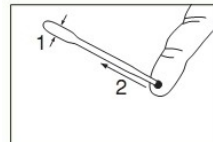

6) - Pressez le bulbe de la pipette et gardez le enfoncé, positionnez le bout de la pipette sur la goutte de sang à prélever et relâchez la pression sur le bulbe de la pipette pour aspirer la goutte.



3) – Une fois dévissé, retirez-le capuchon en tirant parallèlement à l'axe de l'autopiqueur. Attention on ne peut utiliser la lancette que pour une seule opération.

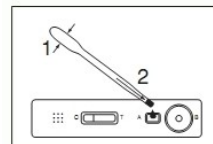


7) - Positionnez le bout de la pipette contenant le prélèvement sanguin à l'endroit **A** de la plaquette de test et pressez sur le bulbe afin que le prélèvement sanguin se déverse sur cette zone de réception prévue à cet effet.



4) - Pour assurer la meilleure efficacité au prélèvement, massez au préalable le bout du doigt afin de provoquer un afflux de sang vers la zone de prélèvement, puis, **appuyez fermement le bout de la lancette contre la zone de ponction** (bout du doigt) et presser le bouton (éléments roses) pour actionner automatiquement le dispositif piqueur.




8) - Déposez 5 gouttes de liquide révélateur à l'endroit de la plaquette marqué **B**.

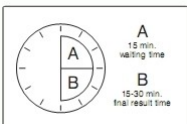

Après manipulations, le résultat doit être interprété endéans les 15 et 30 minutes. Ne tenez pas compte des résultats qui apparaîtraient après 30 minutes.

## Lire le résultat

NOTE : Il n'y a aucune signification attribuée pour l'intensité ou la largeur de la bande de couleur.

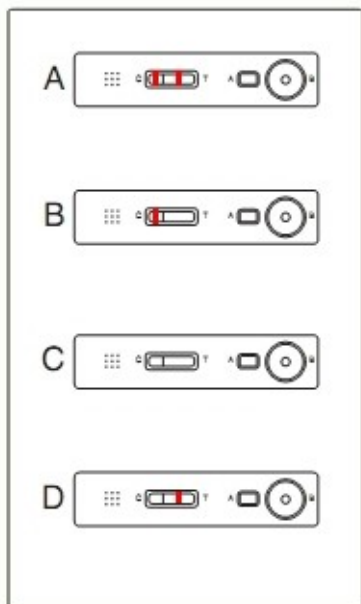

### A POSITIF

Si les antigènes de l'HIV 1 ou 2 **sont présents**, deux traits de couleur apparaissent simultanément dans les zones de contrôle **C** et **T**.

### B NEGATIF

Si les antigènes de l'HIV-1 et/ou HIV-2 **ne sont pas présents**, un seul trait de couleur apparaît dans la zone de contrôle **C**.

### C INVALIDE

Le test est invalide dans le cas où aucun trait de couleur n'est présent entre 15 et 30 minutes. Vérifier la procédure que vous avez effectuée et répéter le test avec un nouveau kit.

### D INVALIDE

Le test est aussi invalide dans le cas où aucun trait de couleur n'est présent après 15 minutes dans la zone de contrôle **C** mais qu'un trait est apparu dans la zone **T**. Vérifier la procédure que vous avez effectuée et répéter le test avec un nouveau kit.

## Comment interpréter le résultat du test?

Comme tous les tests de dépistage, les résultats obtenus, malgré leur haute fiabilité, doivent être considérés comme provisoires. Des tests de confirmation devront alors être effectués conformément aux pratiques locales et recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

### Un résultat "positif" (séropositif)

Signifie que vous vous êtes infecté par le VIH; Il est impératif de réaliser un second test afin de confirmer le premier. En cas de second test positif, il est recommandé de demander à votre médecin de réaliser un troisième test.

### Un résultat "négatif" (séronégatif):

Signifie que vous ne vous êtes pas infecté par le VIH. Attention, ce résultat n'est fiable à 100 % que si la dernière transmission éventuelle du virus remonte à au moins trois mois avant le test;

Il ne signifie pas que vous êtes immunisé contre le VIH ou résistant au virus. Continuez à appliquer les règles de précaution dévolue en la matière. N'utilisez pas d'aiguilles et de seringues déjà utilisées.

Le respect des règles de protection sexuelles et de l'usage de drogues à moindres risques est la meilleure protection contre une infection par le VIH.

## Quelles conséquences un résultat de test positif peut-il avoir pour moi?

Pas de panique : depuis la mise au point des trithérapies, les personnes séropositives peuvent mener une vie normale et planifier à long terme.

Il est tout aussi indispensable de consulter un médecin ou votre antenne régionale d'Aide Contre le Sida, pour vous informer sur les soutiens disponibles : traitement médical, soutien psychologique, groupe d'entraide.

Les antennes régionales de l'Aide contre le sida proposent également un conseil téléphonique qui vous permet de garder l'anonymat.

Enfin, Il indispensable d'informer son partenaire afin que celui-ci/celle-ci effectue sans délai un test.

# EOLEMED

Rue du Framboisier,12 - 1180 Brussels - Belgium

Tel: +32 (0) 2 373 07 70 - Fax: +32 (0) 2 374 00 25

Email: [eole@euton.com](mailto:eole@euton.com) - URL: [www.eolemed.com](http://www.eolemed.com)